

D-ACTOR® 200



Úspěšná terapie proti celulitidě



Terapie Akustickou Vlnou (AWT) prováděná radiální aplikátorem D-ACTOR využívá intenzivní akustické vlny zavedené do těla pacienta ve formě velmi krátkých pulzů. AWT je první účinná metoda s dlouhotrvajícím efektem na celulitidu stupně I až III.

Akustické vlny se užívají v medicíně s velkým úspěchem od roku 1980 pro rozbíjení ledvinových kamenů (ESWL) a od roku 1992 pro léčení ortopedických bolestí u šlach a svalů (ESWT).


Lékařská a kosmetická pracoviště využívají radiální AWT aplikátor přednostně pro následující zákroky:

- ▶ léčba celulitidy I až III stupně
- ▶ zpevnění svalové a vazivové tkáně
- ▶ lymfedém
- ▶ zmenšení obvodu – „zeštíhlení“

Oblasti zákroků AWT:

- ▶ vnitřní strana paží
- ▶ hýždě
- ▶ břicho
- ▶ stehna

Účinek na pokožku a podkožní tkáň

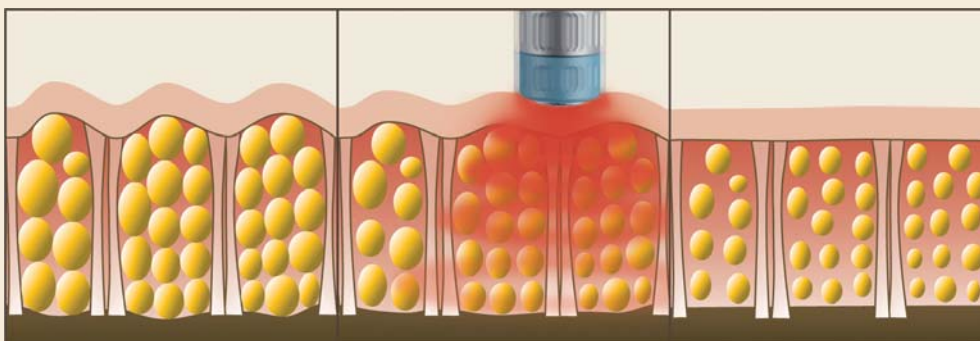

Před AWT

Zvětšené tukové buňky jsou vytlačovány proti povrchu kůže a vytvářejí na kůži typickou strukturu pomerančové kůry. Nepružná vertikální vazivová tkáň se neprotahuje spolu s okolní tukovou tkání, což vede k nežádoucímu důlkovitému vzhledu kůže. Místní průtok krve je významně omezen.

Během AWT

Kmitající akustické vlny jsou zavedeny do těla. Vazivová tkáň se uvolňuje a zvyšuje se pevnost pokožky. Průtok krve v tkáni se výrazně zvyšuje. Je podporována tvorba kolagenu zpevňující dermis a epidermis.

Po AWT

Výsledkem AWT je zlepšená pevnost a obnovená přirozená pružnost kůže a vazivové tkáně spolu s viditelným a dlouhotrvajícím zlepšením struktury kůže.

Technické parametry:

v x š x h = 16,5 x 34 x 34 cm, hmotnost 6,5 kg, hmotnost aplikátoru 445 g, nastavitelná frekvence pulzů AWT: 1-21 Hz, doplňková vibrační terapie: 1 – 35 Hz, spouštěcí tlačítko pulzů přímo na aplikátoru, úroveň energie: 1,4 – 5 barů, obsahuje kompresor